

Руководство пользователя

Ирригатор H2Ofloss hf-8

БЕЗОПАСНОСТЬ

При использовании электрических устройств, особенно детьми, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности :

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПОЛНОСТЬЮ.

ВНИМАНИЕ:

Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

- После использования всегда отсоединяйте прибор от сети.
- Не трогайте зарядное устройство мокрыми руками.
- Не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Периодически проверяйте провод на целостность.
- Не пользуйтесь прибором, принимая ванную.
- Не храните и не размещайте прибор в местах, где есть риск его уронить в раковину, ванную или туалет.
- Если прибор упал в воду, не используйте его. Немедленно отключите от сети.


Внимание:

Во избежание риска получения ожогов, электрического шока, пожара или травмирования

- Не включайте прибор в сеть с напряжением, отличным от сети, с которой должен работать прибор..
- Никогда не пользуйтесь прибором с дефектом шнура или розетки, с дефектами, полученными в результате падения, или упавшими в воду.
- Сопровождайте детей, использующих прибор, будьте рядом и помогайте им.
- Не направляйте струю воды под язык, в глаза, в нос или другие деликатные области. Прибор может производить давление, опасное травмированием этих областей.
- Используйте прибор только по назначению, согласно инструкции и рекомендациям. Вашего стоматолога
- Не используйте дополнительных устройств, не рекомендованных производителем.
- Заполняйте резервуар теплой водой или другими жидкостями, которые рекомендованы Вашим стоматологом..
- Никогда не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия прибора.
- Не пользуйтесь прибором, если имеете во рту ювелирные украшения. Перед использованием удалите их.
- Не пользуйтесь прибором в помещениях, где распыляется кислород или аэрозольные спреи.
- Не добавляйте соду, соль или другие абразивы в воду, так как это может привести к поломке ирригатора.
- Если Вы перенесли в течении последних 12 месяцев операции во рту ,перед использованием ирригатора проконсультируйтесь с Вашим стоматологом.
- Не пользуйтесь прибором свыше 8 минут(= 4 резервуара) при высоком давлении или 4 минут(=2 резервуара) на низком давлении каждые 2 часа.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!

Устройство

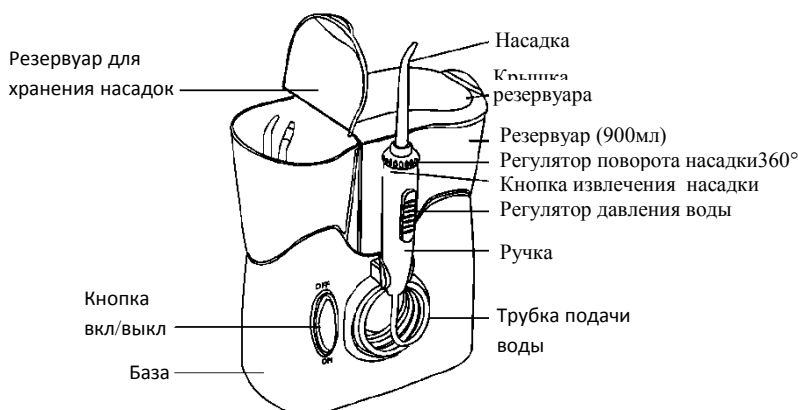


ПРИМЕНЕНИЕ

Подключите устройство к источнику тока соответствующего напряжения. Если розетка снабжена выключателем, убедитесь, что он включен.


Хранение насадок

Поместите в контейнер для хранения насадок 2 части подставки под насадки. Удалите подставки. Вы можете увеличить вместимость контейнера. Максимально: 20 насадок.

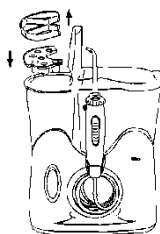


Подготовка резервуара

Откройте крышку резервуара. Снимите резервуар с базы и заполните теплой водой. Разместите резервуар на базе немного нажав на него. Закройте крышку резервуара.

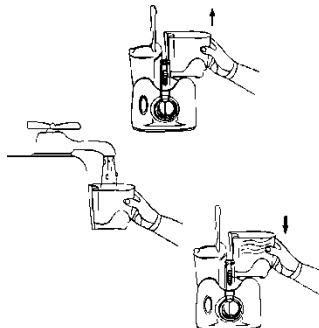

Установка и удаление насадок


Вставьте насадку в ручку. При правильной установке не должно быть промежутка между ручкой и цветным кольцом насадки. Для удаления насадки нажмите кнопку извлечения насадки и выньте ее.

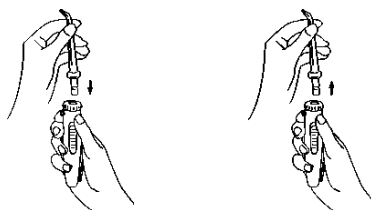

Регулировка давления

Включая прибор (кнопка включения в положении "on") держите насадку направляя ее в сторону раковины.


Как только вода начнет вытекать из насадки, приостановите течение воды регулятором давления и затем установите с его помощью комфортное для Вас уровня давления

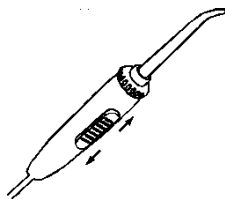

Расположение во рту

Наклонитесь над раковиной и поместите насадку в рот. Направьте струю воды в сторону зубов.

Свободной рукой включите аппарат кнопкой вкл/выкл, расположенной на базе. Установите желаемое для Вас давление.

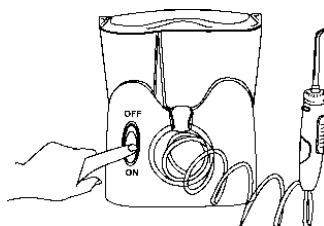


Направление струи регулируйте поворачивая регулятор вращения насадки.

Рекомендованная техника

Наклонитесь над раковиной и направьте струю воды на зубы и десна. Отрегулируйте давление воды кнопкой регулировки давления, расположенной на ручке. Держите рот достаточно широко открытым, чтобы вода вытекала наружу.

Направьте струю воды под углом 90 градусов к зубному ряду вдоль линии контакта зубов и десен. Обрабатывайте струей воды каждый зуб и каждый промежуток между зубами.

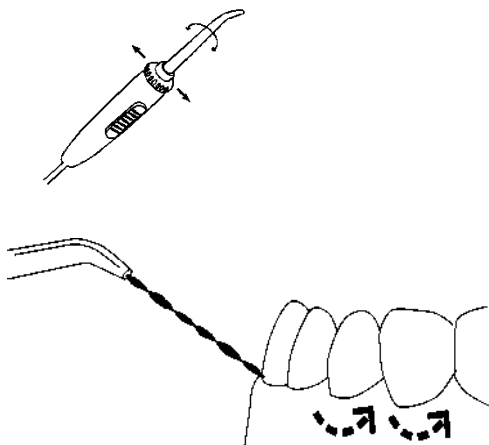

Окончание

Выключите прибор. Удалите воду из резервуара. Отключите прибор от источника тока.

Специальные насадки

ПЕРИОДОНТАЛЬНАЯ НАСАДКА

Поместите насадку между зубом и десной под углом 45 градусов и аккуратно углубите мягкий кончик насадки под десну в десневой карман. Начните промывание на самом низком давлении установив кончик насадки между зуба, далее аккуратно продвигайте насадку в кармане, продолжайте движение вдоль десны, массируя их и промывая десневые карманы.

ЛОЖКА ДЛЯ ЧИСТКИ ЯЗЫКА

Наклоните голову над раковиной. Установите регулятор давления воды в минимальное положение. Проводите ирригацию, расположив насадку на языке и двигая ее от середины к кончику языка. Повторяйте движения по всей площади языка. Увеличивайте давление воды от минимального до комфортного для Вас уровня.

ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ НАСАДКА

Используйте ортодонтическую насадку для чистки и промывания труднодоступных областей брекетов, коронок, мостов и имплантатов. Начинайте с последнего моляра(задние зубы).Поместите насадку под углом 90 градусов к линии контакта зубов и десен. Аккуратно двигайте насадку вдоль линии, уделяя особое внимание областям прикрепления брекетов к зубам. Продолжайте процесс пока не очистите весь ряд.

СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ НОСА

Носовая насадка чрезвычайно эффективна для очистки носа, носовых пазух и поддержания здоровья в носовой полости..

Важные меры безопасности во избежание травм:

- Следуйте инструкциям врача относительно использования прибора.
- Внимательно следите за использованием прибора детьми и лицами с особыми потребностями.
- Не используйте носовую насадку нигде кроме носа.
- Не используйте другие насадки для промывания носа кроме носовой насадки.
-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Если у Вас острый синусит, обратитесь к врачу прежде, чем использовать насадку.
- Нужно уменьшить давление подачи воды в нос, если при использовании носовой насадки есть ощущение дискомфорта в виде тошноты или боли в ушах..

Возможно возникновение кашля при использовании насадки потому ,что вода может попадать в горло.




ПОДГОТОВКА РАСТВОРА:

Для максимального комфорта используйте соляной раствор или раствор, предложенный врачом.

Приготовление соляного раствора: 1 чайную ложку соли, ½ чайной ложки пищевой соды полностью растворите в стакане теплой воды. Тщательно растворите соль и залейте в резервуар.

ИНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- Разместить носовую насадку в отверстие на рукоятке, нажать и зафиксировать
- Установите мягкую синюю часть насадки над раковиной, открытым концом вверх
- Включите ирригатор и аккуратно регулируйте давление воды для его оптимальной настройки, чтобы поток равнялся 2-3см в высоту.
- Склонитесь над раковиной. В такой позе раствор не сможет попасть в горло, а процедура будет комфортной и безболезненной
- Ввести насадку в носовой ход и включить прибор

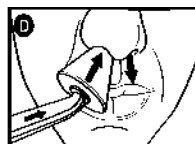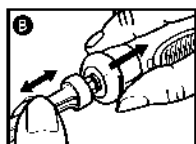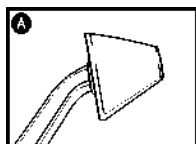

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Промывая нос раствором из соли и воды, вы очищаете полость носа от посторонних веществ
- Убираете жидкость с воспаленных мембран носа, что способствует устранению отеков, улучшению циркуляции воздуха и открытию носовых ходов
- Соленая вода вытягивает слизь и улучшает дыхание, а также очищает проходы синуса (пазухи)
- Используя носовой наконечник и раствор, вы улучшаете дыхание и освобождаете носовые пазухи от слизи быстрее.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Убедитесь в отсутствии воды в системе, включите прибор на 2-3 секунды для полного слива воды после использования. В противном случае в системе в оставшейся воде будут скапливаться бактерии.
- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- По необходимости для чистки внешней части прибора используйте неабразивные средства и протирайте ее мягкой тряпкой.
- Для очистки резервуара используйте мыльную воду.
- Перед чисткой отключите прибор от сети. Очищайте прибор от грязи с наружной стороны с помощью щетки или аналогичных предметов.
- Высушите резервуар, если Вы не используете его длительное время.

НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДКИ
Стандартная насадка и ложка для чистки языка Промежуток между насадкой и ручкой.	Насадка не плотно соединена с ручкой	Извлеките насадку и установите заново
Периодонтальная насадка Разрыв мягкого наконечника	Насадка изношена	Замените насадку новой
База Протечка шланга	Шланг поврежден	Обратитесь в сервис-центр.
Протечка резервуара	Повреждение клапана.	Выньте резервуар и установите заново в правильном положении
Плохое давление	Резервуар установлен неправильно	Переустановите резервуар, немного нажав на него.
Прибор не включается	Не работает мотор	Удостоверьтесь, что розетка работает